

# สวัสดี, ยินดีต้อนรับ !

## ระบบรวบรวมคู่มือการตั้งค่าการใช้งานโปรแกรม

[Learn more](#)

### การตั้งค่าเครื่องพิมพ์รุ่น Godex สำหรับโปรแกรมกรมผู้ป่วยในใหม่ สำหรับสติกเกอร์ Godex

หลังจากติดตั้ง Drive เครื่องพิมพ์แล้วให้ทำตามขั้นตอนการตั้งค่าตามภาพข้างล่าง

ปล. อย่าลืมลง Font Thai Saraban เต็ดขาด


\* สำหรับการ share ทำตามปกติเหมือนเครื่องเดิม แต่เพื่อความ sure ให้เลือกมวลนฉลากตาม sticker ที่เลือกอีกครั้ง

\*\* แก้ปัญหาการที่เวลา print A4 แต่ขนาดที่พิมพ์ออกมาเท่ากับ Godex แล้ว

Download Drive Godex Version 7.3.1\_M-2 (downloads/Godex\_7.3.1\_M-2)

#### EXAMPLE


### ตั้งค่าเครื่องผู้ใช้งาน

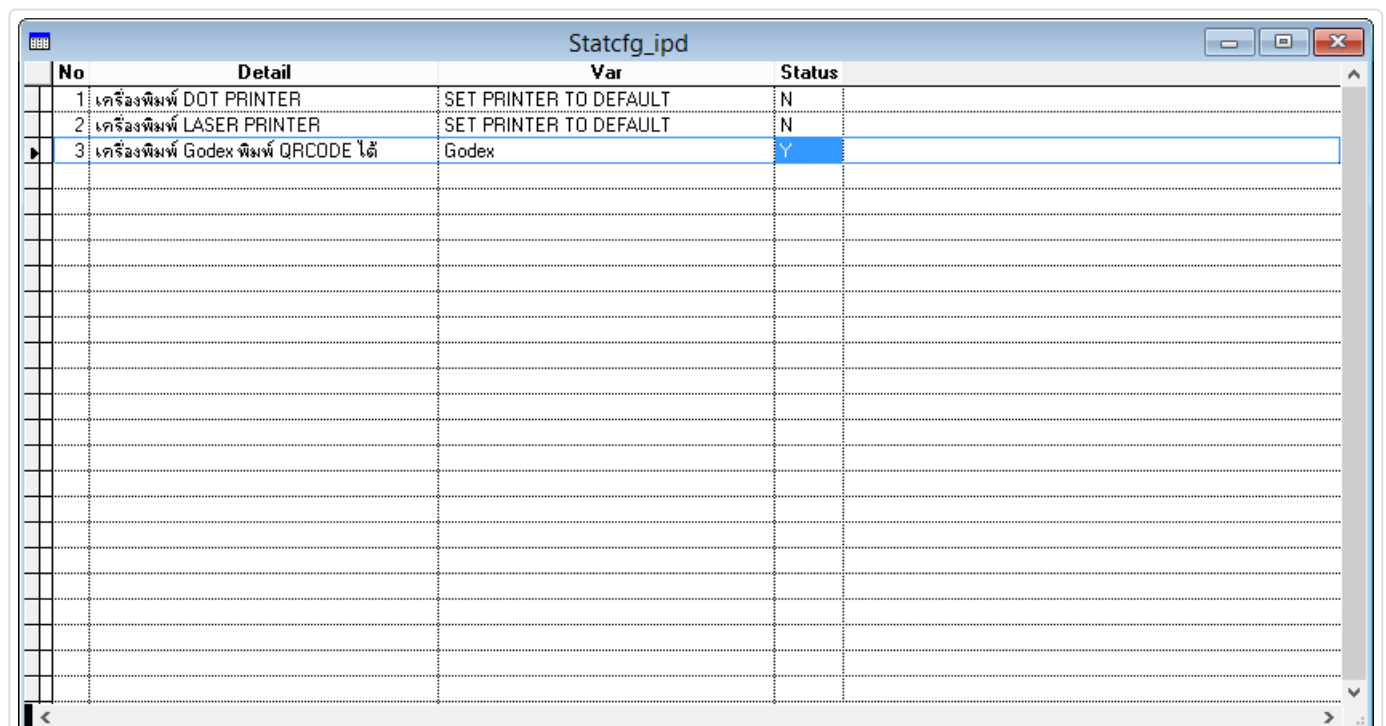


No	Detail	Var	Status
1	เครื่องพิมพ์ DOT PRINTER	SET PRINTER TO DEFAULT	N
2	เครื่องพิมพ์ LASER PRINTER	SET PRINTER TO DEFAULT	N
3	เครื่องพิมพ์ Godex พิมพ์ QR CODE ได้	Godex	Y

เปิดระบบให้สามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ใหม่ได้ โดยแก้ไขไฟล์ที่ Drive c:\statcfg\_ipd.dbf เปลี่ยน status ของเครื่องพิมพ์ Godex ให้เป็น Y

## Printing Preferences:ตั้งค่าหน้ากระดาษ

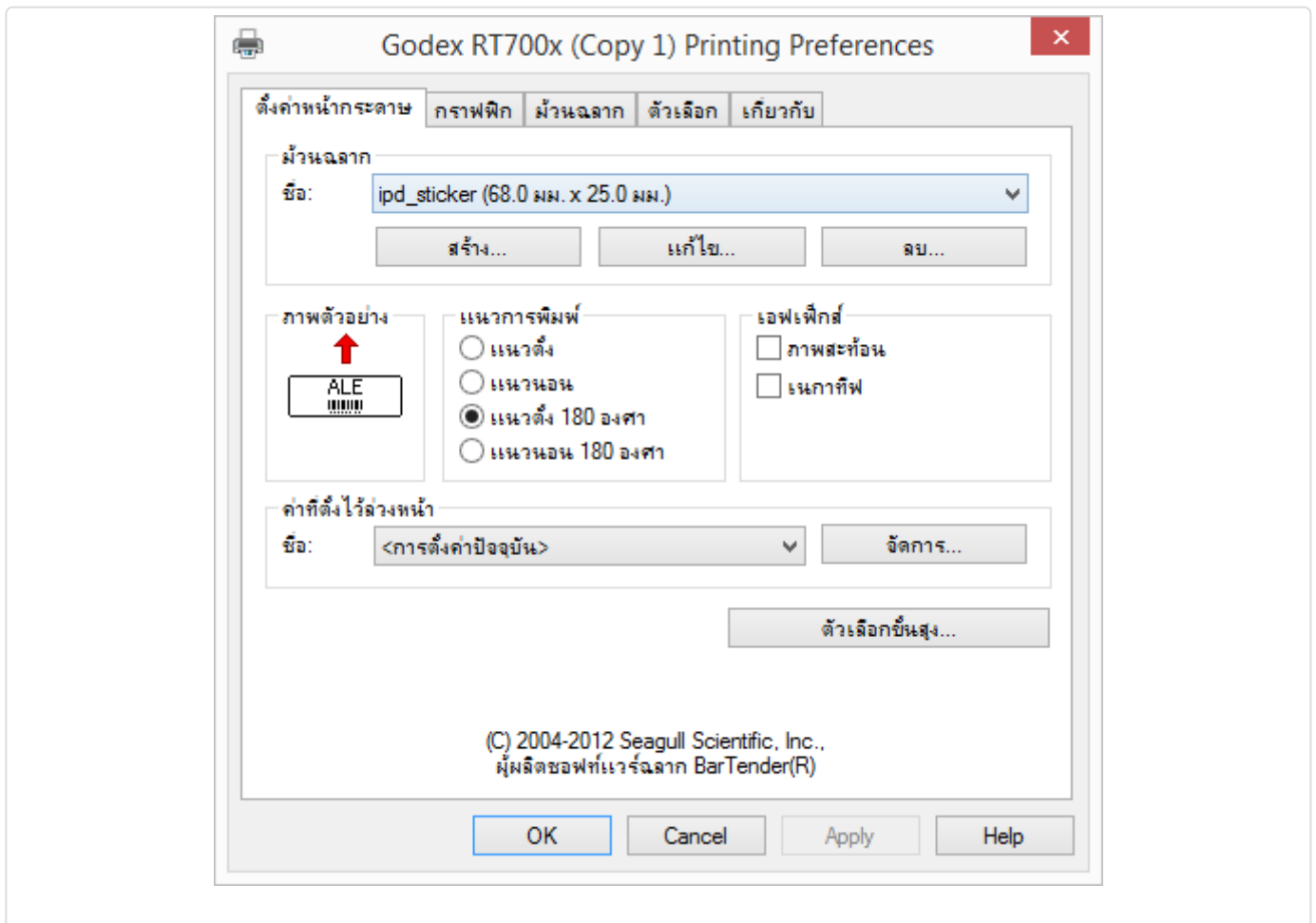


## Printing Preferences:ตั้งค่าหน้ากระดาษ

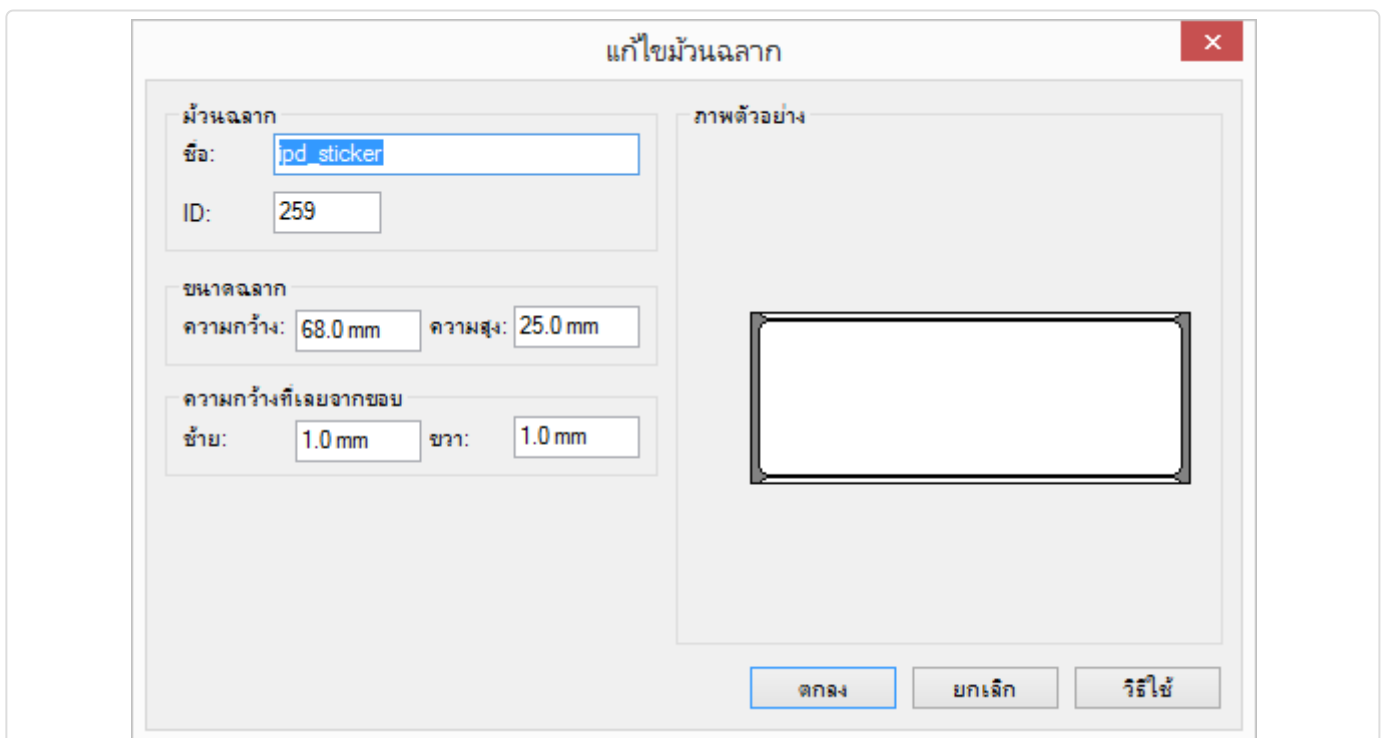

- สร้างม้วนสลากร ขนาดฉลากความกว้าง 68 mm. ความสูง 25 mm.
- ความกว้างที่เลยจากขอบกระดาษด้านซ้าย 1.0 mm. และด้านขวา 1.0 mm.

## Printing Preferences:กราฟฟิก

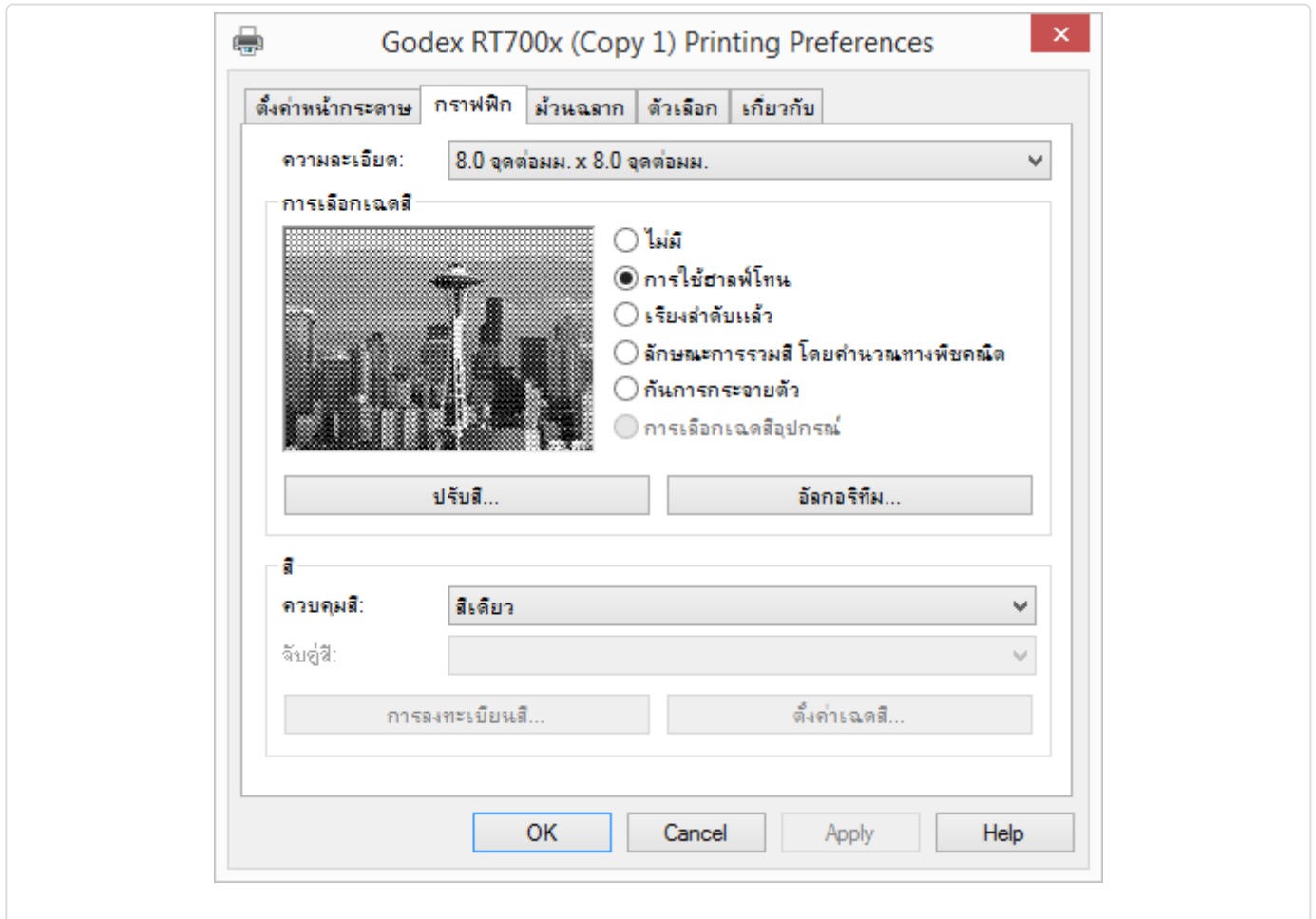

## Printing Preferences:ม้วนฉลาก

Godex RT700x (Copy 1) Printing Preferences

ตั้งค่าหน้ากระดาษ กราฟฟิก **ตัวเลือก** เกี่ยวกับ

**การตั้งค่าสื่อ**

ใช้การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ปัจจุบัน

วิธีพิมพ์: การถ่ายความร้อนโดยตรง

ชนิดสื่อ: ฉลากที่มีช่องว่าง

ช่องว่างฉลาก: 2.0 มม. ความกว้างเครื่องหมายสีดำ: 3.0 มม.

ป้อนเพิ่มเติม: .0 มม. ออฟเซตเครื่องหมายสีดำ: .0 มม.

**การจัดการสื่อ**

การดำเนินการหลังพิมพ์: ไม่มี

การปรากฏขึ้น:

ช่องทำง:

**การจัดตำแหน่ง**

ใช้การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ปัจจุบัน

ความยาวป้อนเดิหน้า: .0 มม. ตำแหน่งหยุด: 15.0 มม.

OK Cancel Apply Help

# ตั้งค่าสื่อ > ช่องว่างฉลาก แก้ไขเป็น 2.0 มม.

# การจัดตำแหน่ง > ตำแหน่งหยุด แก้ไขเป็น 15.0 มม.

## Printing Preferences:ตัวเลือก

